



Subbandage & Body zařízení  
na měření tlaku

**Návod k použití**


# Kalibrace

Vzhledem ke změnám v atmosférickém tlaku, musí být měřidlo kalibrován, pokud je hodnota na displeji je více než  $\pm 1$  mmHg.

1. Dva provádění 0mmHg kalibraci, - spínač na metr před připojení trubek.
2. Zkontrolujte tlak Indikace SOM  $\pm 000$ . na displeji. Seřizovací šroub je umístěn Na horní části přístroje (viz obr. 2).
3. Pokud je nutná úprava, použijte malý žlutý šroubovák a otočte seřizovacím šroubem pouze. Do několika mm je zobrazena 0 mm Hg. Metr nyní kalibruje. Šroub velmi pečlivě. POZOR! Netlačte těžké, jak to ska ohnout nastavení komponenty.

# Připojení metr

1. První Připojte hadici s 3-cestným ventilem til m (obr. 1).
2. Druhý Připojení valgte senzor (balón) na 3-cestného ventilu podle použití luer.
3. Otočte 3-cestný ventil dvou uzavřených polohy (obr. 3) Nyní je měřicí přístroj připraven k použití.

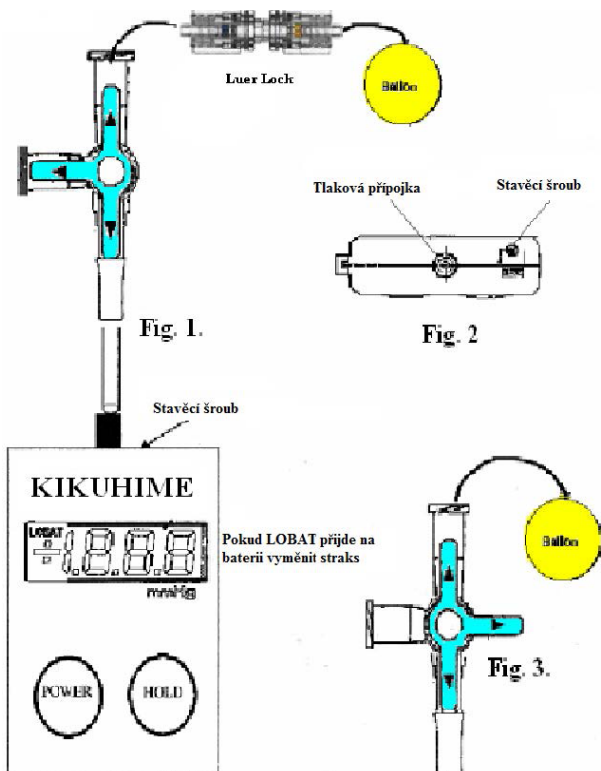

"HOLD" je tlačítko "zmrazení" výsledků měření.

# Oblast působnosti

## Měření subbandage tlak při stlačení obvazem a elastického skladováním

Měření subbandage tlak při stlačení obvazem a elastického skladováním Příklad: Školení nových zaměstnanců hojení rány. Pokud se objeví nové hojení ran pracovníci er Pochybnosti jako dvě použití obvazu, zkontrolujte subbandage tlak. Pedagogický metoda zobrazující pacienta, jak se subbandage změny tlaku da walking - motivace pro uplatnění lýtkový sval (sval žilní pumpa). Ověření různých subbandage tlaku na v kotníku a za kotníkem - důvod pro použití podložky. Jak zkontrolovat elastické punčochy, např. v souvislosti s navazujících návštěv / následné péče (prevence nového bérceových vředy). Možnost použití elastických punčoch jako léčba vředů bérceových místo kompresními obvazy. Zkontrolujte subbandage tlak, můžete použít dva punčochy na stejné hře místo jednoho. Højere pacientem je získána NAR pomocí elastických punčoch místo obvazy. lepší šance Získání odstupňované subbandage tlak.

## Aplikace kompresní obvaz s Easy Glide s nákupy (Small senzor)


Umístěte senzor uvnitř Easy Glide s nákupními, 1 cm od dna. Umístěte Easy Glide na kotníku úrovni. Provedte použití kompresního obvazu jako obvykle. Zkontrolujte subbandage tlak na kotníku úrovni. Demontujte snímač tahem trubky a Easy Glide.

## použití velkého snímače (příslušenství)

Subbandage měření tlaku během kompresními obvazy, Ex.: Training nový zdravotnický personál, Ověřování subbandage tlak, pokud nové ošetřovatelského personálu je nejistý. Pedagogická Metoda dvě ukázat pacientovi, jak subbandage změny tlaku vid hodinu MOTIVATE pro výkon lýtkový sval (svalová žilní pumpa). ověření jiný subbandage tlak na kotníku a za kotníkem. - Grunner pro výcvik nových ošetřovatelského personálu. Ověření různých subbandage tlaku na kotníku a za-kotníkem,-ospravedlnění pro použití podložek.


## Aplikace kompresní obvaz s EasyGlide

Umístěte senzor 2 cm od tlačítkem složeného EasyGlide na kotníku úrovni (Pokud je to možné požádat pacienta dva týmy EasyGlide a trubky až ke kolenu). Provedte použití kompresního obvazu jako obvykle. Zkontrolujte subbandage tlak na kotníku úrovni, na displej. Až budete hotovi, odstraňte snímače koupit tahání trubici a vnější vrstva EasyGlide na stejné hodin. Zkontrolujte tlak těsně pod kolena sikre absolvoval komprese.

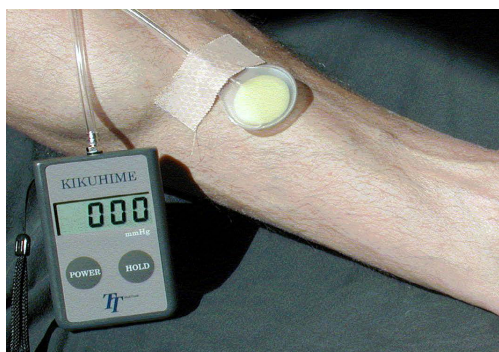

Správné umístění senzoru

# Specifikace

Kikuhime Subbandage & Body zařízení na měření tlaku	
Type	HPM - KH-01
Power-knap	On/off
Podržte tlačítko	Freeze výsledek měření
Rozsah tlaku	0-120 mmHg
Časy zo.	Cca. . 3 krát za sekundu
Funkce	Automatické vypnutí po 3 minutách
Přesné	+/- 8 mmHg
Baterie	Používejte pouze ER6VM baterie (použití typu andre může způsobit nedostatek napětí, vedlo věc abnormálního provozu.
Údržba	Pokud obarví, otřete hadříkem kouřící, som er namočené do neutrálního čistícího prostředku. Nepoužívejte benzín. Senzory: Chcete-li být očištěna alkoholem pouze.
Upozornění	Vyhnete se použití Kikuhime ve vysoké elektrostatické oblasti. Před použitím Kikuhime, vybijte elektrostatický energii. Neotvírejte kryt baterií na zadní straně Kikuhime je. V případě potřeby výměny baterií, prosím, návrat přístroje dva TT Meditrade. Použití mobilních telefonů nebo André vysílačů okolí Kikuhime použití vid může vést dva falešné hodnoty.
	Typ B Praktická část
Záruka	Free replacement within 2 years of delivery (Sensors only one year) if design or manufacture faults are diagnosed. This guarantee does not covers any subsequent damage, such as damage caused by misuse, modifications, repair by user, or by use of other gasses than air.
Item no.	KKH-001

## Sada Kikuhime obsahuje

- 1 Kikuhime tlaku metru
- 2 Malé senzory
- 1 šroubovák pro kalibraci
- 1 EasyGlide se zákonem
- 1 Bag





**TT Meditrade | ZiboCare Denmark**  
Præstemarksvej 67, DK-8700 Horsens  
Denmark

Tlf.: +45 7879 7069

E-mail: [info@ttmeditrade.dk](mailto:info@ttmeditrade.dk)

SE: 29610274

